


cardiolife connect

DES FONCTIONNALITÉS VITALES  
**APPLICATION MOBILE**  
**SUIVI GPS**  
**SURVEILLANCE DAE**  
**24 h/24, 7 j/7**

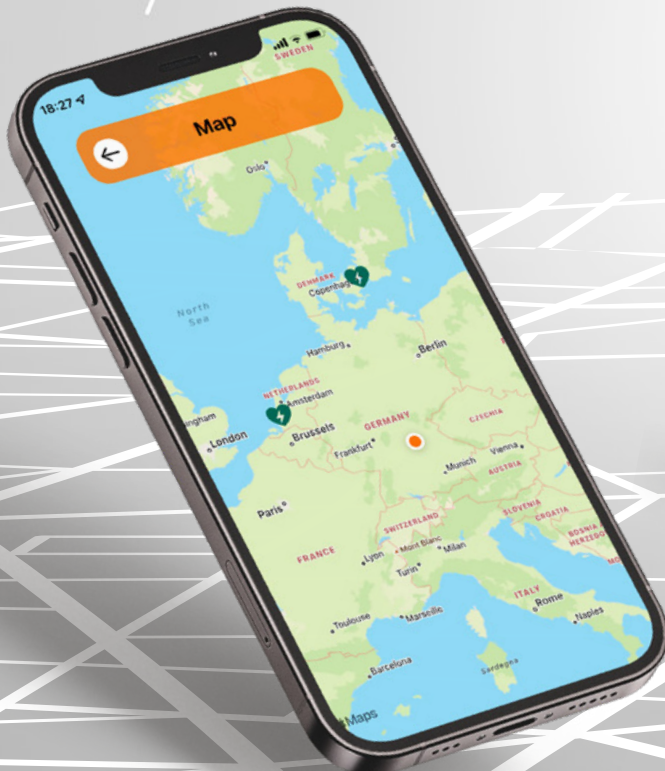

# SÛRETÉ CARDIAQUE

La solution cardiolife connect de Nihon Kohden fournit une gestion complète des défibrillateurs automatisés externes (DAE), y compris une surveillance exhaustive du cardiolife AED-3100 et d'autres DAE connectés. Vous bénéficiez ainsi d'informations pertinentes sur le statut actuel du DAE, mais aussi sur sa position GPS exacte et sur son éventuelle utilisation sur un patient.

De plus, la plateforme est entièrement personnalisable selon les exigences individuelles en matière de notifications et d'intégration.

## SURVEILLANCE ET PRÉPARATION 24 H/24, 7 J/7

La solution cardiolife connect est utilisée pour le suivi 24 h/24, 7 j/7 du défibrillateur cardiaque. Nihon Kohden vérifie que le DAE est opérationnel, en contrôlant par exemple la durée de vie des électrodes jetables ou bien le niveau de batterie.

Vous pouvez choisir de recevoir des rappels d'autotests quotidiens ou mensuels, ainsi que des alertes d'événements spécifiques, comme l'activation du DAE ou son éloignement par rapport à une localisation donnée.

cardiolife connect vous permet de sélectionner différentes notifications.

Vous pouvez aussi décider de recevoir ou non des notifications par e-mail ou par SMS concernant les événements préalablement choisis.




E-mail



SMS



Messenger

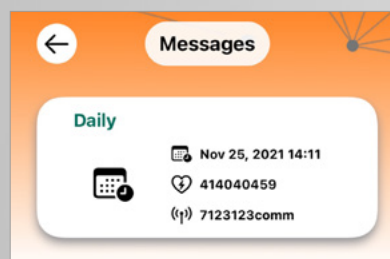


# TABLEAU DE BORD ET APPLICATIONS

La technologie de cardiLife connect s'appuie sur un module de communication et un tableau de bord accessible sur le web qui fournit une visibilité complète sur le parc de DAE. L'opérateur peut ainsi surveiller à tout moment le fonctionnement et la préparation de tous les dispositifs déployés. Cette vue centralisée est également consultable à partir des applications CardiLink® pour smartphones iOS et Android.

The screenshot displays the CardiLink web dashboard. On the left is an orange navigation sidebar with menu items: Dashboard, Defibrillator, General Information, Settings, Hardware, Geolocations, Movements, Messages, Self Tests, and Service Tickets. The main content area is divided into several sections:

- Defibrillator: 100015**
  - Model Nr: AED-3100
  - Owner: Nihon Kohden Corporation
  - Description: Nihon Kohden Europe GmbH-Entrance Lobby
  - Active Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM
- Communicator: 1000000000015**
  - Connectend Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM
- Service Tickets**
  - No service tickets created for this device.
- Address Information**
  - Raiffeisenstraße 10
  - 61191 Rosbach vor der Höhe
  - Germany
- Availability**
  - 24/7
  - Public Available
- Last Messages**
  - 09/20/2022 23:27:28 - DAILY SelfTest received
  - 09/19/2022 23:20:29 - DAILY SelfTest received
  - 09/18/2022 23:18:12 - DAILY SelfTest received

On the right side, there is a green status bar that reads "AED is monitored and ready to be used." Below this are several status cards: "OK", "95%" battery, "90%" signal strength, "Electrodes Expiration" (January 2024), "Battery Expiration" (January 2024), and "Signal strength" (with a bar chart). A "No Movements" card is also present. At the bottom right is a map showing the device's location.

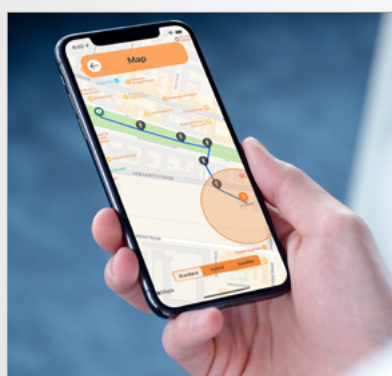


L'application intuitive CardiLink® 2.0, disponible sur Android et iOS, simplifie l'enregistrement et facilite la visualisation des données.





# SUIVI GPS ET GÉOREPÉRAGE

cardiolife connect fournit un suivi GPS complet : la géolocalisation exacte du DAE s'affiche sur une carte numérique.

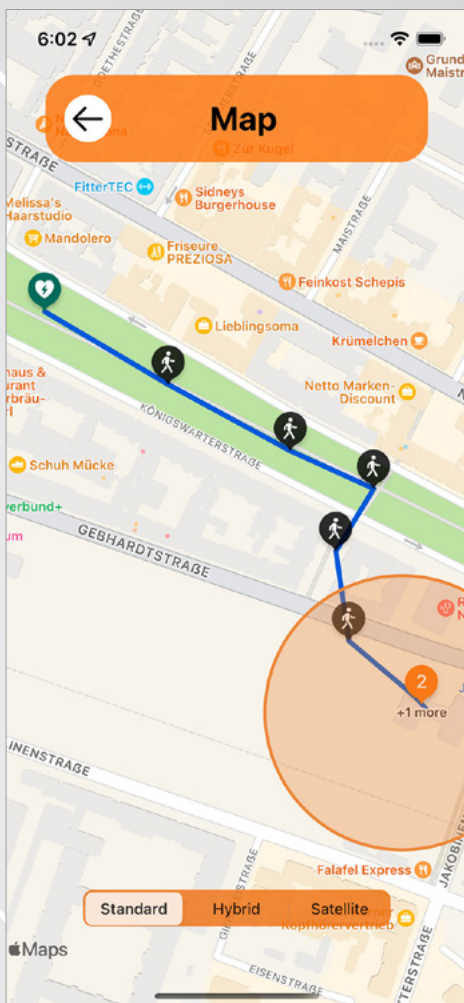


Les mouvements sont détectés et recensés dans la liste prévue à cet effet. La fonction de géorepérage, quant à elle, déclenche une alarme lorsque le DAE quitte un périmètre donné.

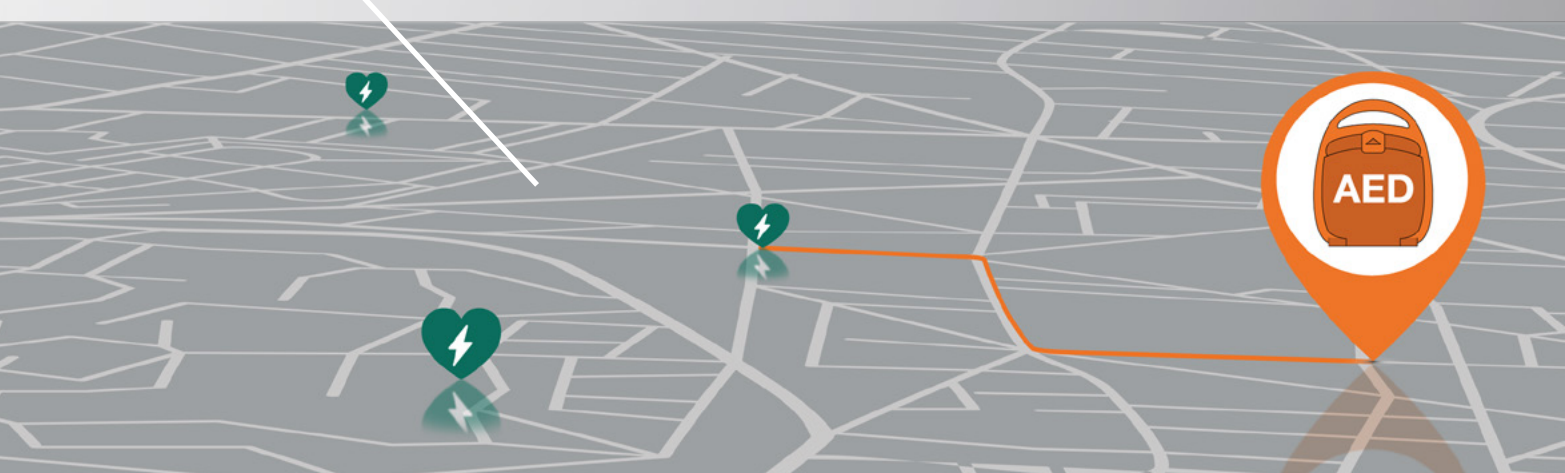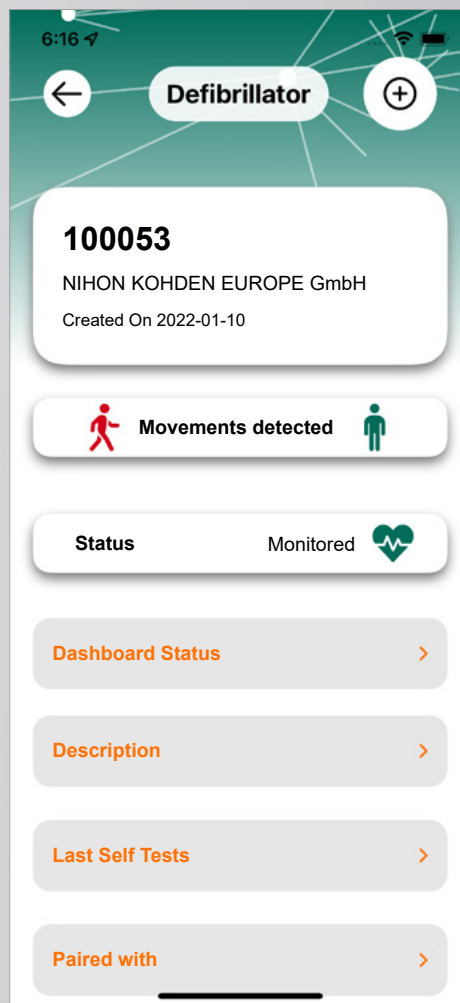

# INTERFACE ET GESTION DE PARC

L'interface de cardioline connect offre une intégration unique, qui permet de transférer les données vers les applications mobiles des services de secours.


Nos fonctionnalités de gestion de parc connectent sur une plateforme unifiée les technologies parfois disparates des fabricants de dispositifs de santé et de sécurité. Cette approche élimine ainsi les complications inhérentes aux déploiements locaux.

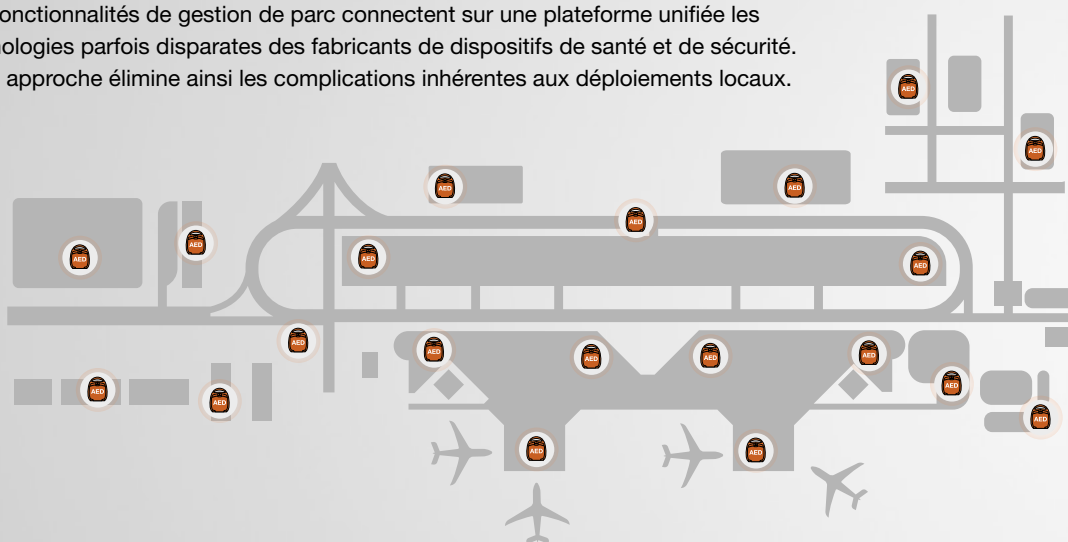

## COMPATIBILITÉ

La solution cardioline connect présente une compatibilité matérielle complète et peut équiper le défibrillateur cardioline AED-3100 actuel de Nihon Kohden.

cardioline **AED**  
AED-3100

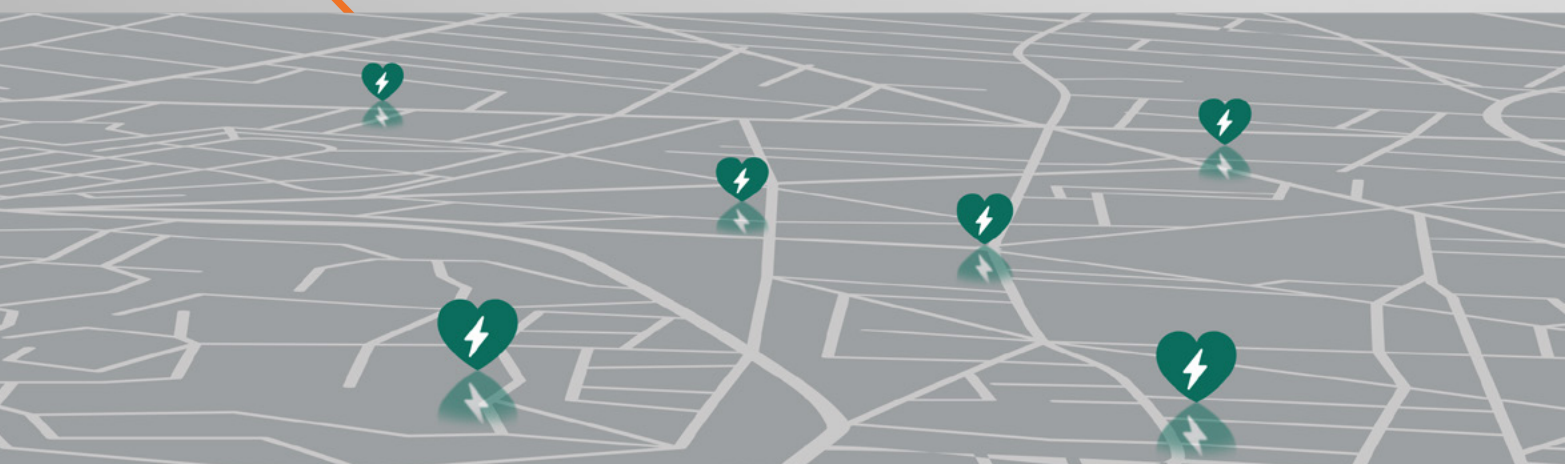



## Improving Healthcare with Advanced Technology

Depuis sa création en 1951, Nihon Kohden a pour mission d'améliorer la qualité de la vie à l'aide de technologies de pointe. Nous fournissons des solutions pour le diagnostic, les soins intensifs, les systèmes d'information clinique et les diagnostics in vitro. Nous sommes à vos côtés pour répondre aux défis des services de santé, aujourd'hui comme demain.

Plus d'informations sur [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com).

### NIHON KOHDEN FRANCE SARL

Centre d' Affaires, La Boursidière,  
Bâtiment C – RDC, 92357 Le Plessis-Robinson, France  
Téléphone: +33 1 49080550, Fax: +33 1 49089332  
Internet : <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail : [info@nkfrance.fr](mailto:info@nkfrance.fr)  
SIRET 479 402 935 00023 (RCS Créteil B)

CardiLink GmbH est le partenaire technologique  
de la solution cardi lifelifeconnect de Nihon Kohden.

Date dernière modification : Septembre 2023  
Bon usage : vous référer à la notice d'utilisation

### NIHON KOHDEN EUROPE GmbH

Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Allemagne  
Téléphone : +49 6003 827 0 – Fax : +49 6003 827 599  
Site web : <https://eu.nihonkohden.com>  
E-mail : [info@nke.de](mailto:info@nke.de)

CardiLink GmbH  
Gebhardtstraße 28, 6. OG OST, 90762 Fürth, Allemagne  
Téléphone : +49 911 733 050 44  
Site web : [www.cardi-link.com](http://www.cardi-link.com)



Nihon Kohden est susceptible de réviser ou de remplacer  
le présent document à tout moment sans préavis.