


cardiolife connect

WEIL ES DARAUF ANKOMMT
SMARTPHONE-APP
GPS-TRACKING
24/7-AED-SERVICE

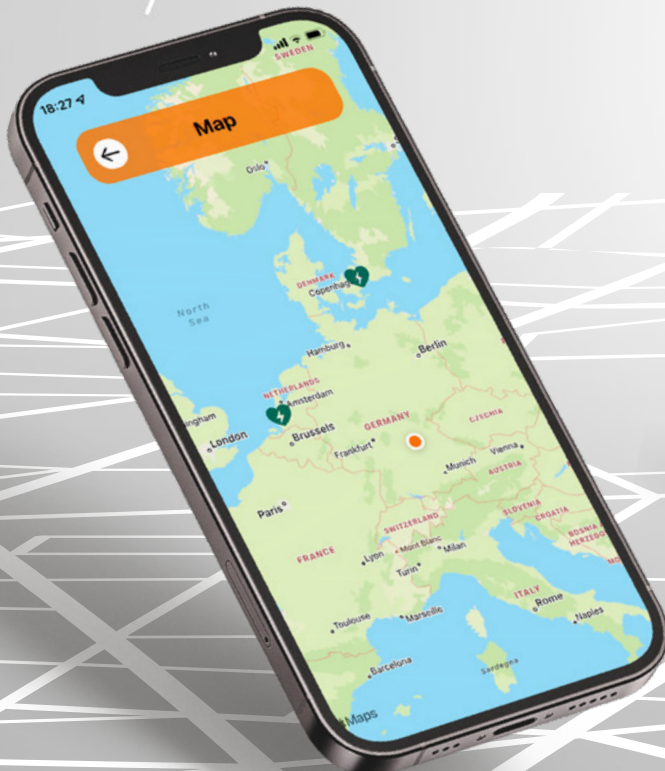

HERZSICHERHEIT

Nihon Kohdens cardiolife connect bietet eine Lösung für ein umfassendes AED-Management, einschließlich einer vollständigen Überwachung des cardiolife AED-3100 und anderer angeschlossener AEDs. Sie erhalten nicht nur Einblick in den aktuellen Status des AEDs, sondern auch in seinen genauen Standort (GPS) und ob er zur Rettung eines Patienten eingesetzt wurde.

Die gesamte Plattform ist in Bezug auf Benachrichtigungen und Integration an die individuellen Anforderungen anpassbar.

24/7-ÜBERWACHUNG UND EINSATZBEREITSCHAFT

cardiolife connect ist für die 24/7-Überwachung des AED konzipiert. Nihon Kohden bietet eine Überwachung des AED, um die Funktionsfähigkeit des Geräts zu überprüfen, z. B. die Haltbarkeit der Einweg-Pads oder den Batteriestand.

Passen Sie Benachrichtigungen so an, dass Sie Meldungen zu täglichen und monatlichen Selbsttests oder zu bestimmten Aktionen erhalten (z. B. wenn der AED eingeschaltet wird oder wenn er einen bestimmten Ort verlässt).

Mit cardiolife connect sind verschiedene Benachrichtigungen möglich.

Sie können festlegen, ob Sie über diese selbstbestimmten Ereignisse per E-Mail oder SMS benachrichtigt werden möchten.




E-mail



SMS




Messenger

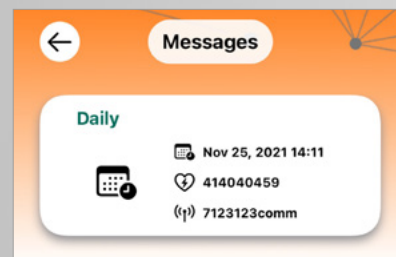


DASHBOARD UND APPS

cardiolife connect besteht aus einem Kommunikationsmodul und einem über das Internet zugänglichen Dashboard, das eine Vogelperspektive auf alle AEDs bietet und dem Bediener die Möglichkeit gibt, das Serviceniveau und die Bereitschaft aller eingesetzten Geräte jederzeit zu überwachen. Auf diese einheitliche Ansicht kann auch über die CardiLink®-Apps für iOS- und Android-Smartphones zugegriffen werden.

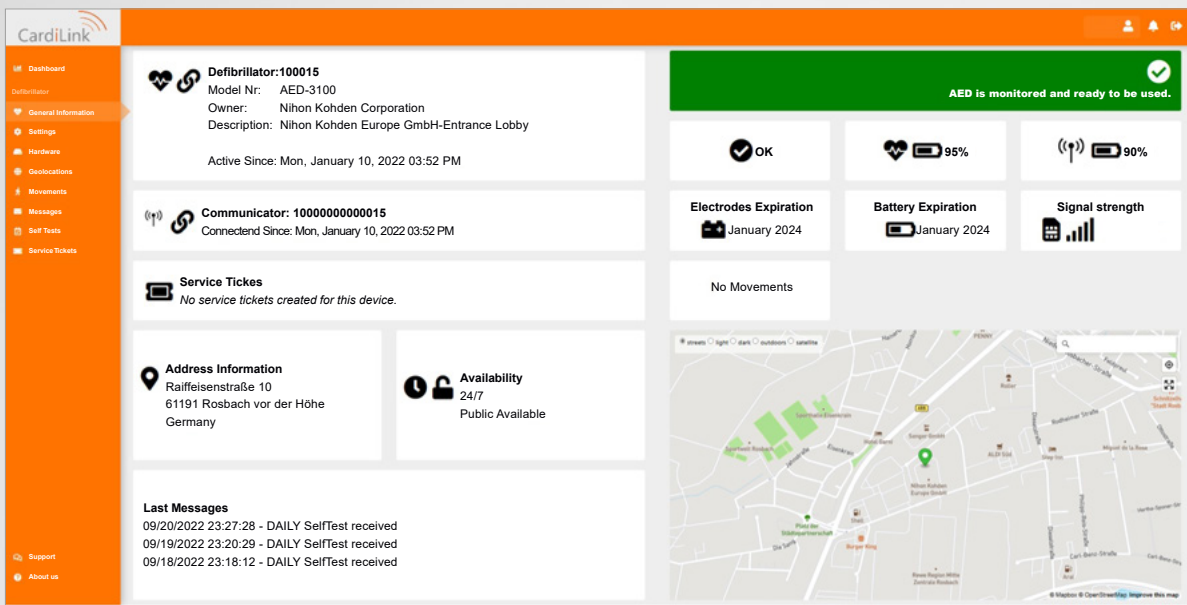

The screenshot displays the CardiLink dashboard interface. On the left is a navigation menu with options like Dashboard, Defibrillator, General Information, Settings, Hardware, Geolocations, Movements, Messages, Self Tests, and Service Tickets. The main content area is divided into several sections:

- Defibrillator: 100015**: Model Nr: AED-3100, Owner: Nihon Kohden Corporation, Description: Nihon Kohden Europe GmbH-Entrance Lobby, Active Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM.
- Communicator: 10000000000015**: Connectend Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM.
- Service Tickets**: No service tickets created for this device.
- Address Information**: Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany.
- Availability**: 24/7, Public Available.
- Last Messages**: 09/20/2022 23:27:28 - DAILY SelfTest received, 09/19/2022 23:20:29 - DAILY SelfTest received, 09/18/2022 23:18:12 - DAILY SelfTest received.
- Device Status**: AED is monitored and ready to be used. OK, 95% battery, 90% signal strength.
- Electrodes Expiration**: January 2024.
- Battery Expiration**: January 2024.
- Signal strength**: Visualized as a bar chart.
- Movements**: No Movements.
- Map**: A map showing the location of the AED.

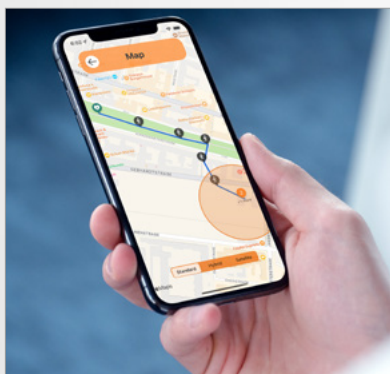


Die App erleichtert intuitiv die Visualisierung der Daten. Die Registrierung erfolgt auf ganz einfach über die CardiLink® 2.0-App, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar ist.





GPS-TRACKING UND GEO-FENCING

cardiolife connect ermöglicht eine echte GPS-Folgerung. Genaue Informationen über den Standort des AED werden auf einer digitalen Karte angezeigt.

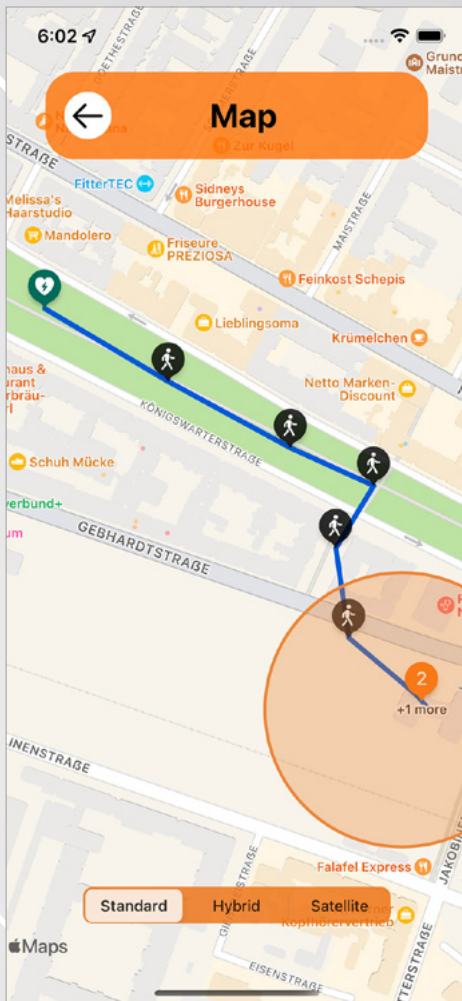

Details zur Bewegungsaktivität sind in der Bewegungsliste verfügbar. Die GEO-Fencing-Funktion löst einen Alarm aus, wenn der AED einen definierten Radius verlässt.

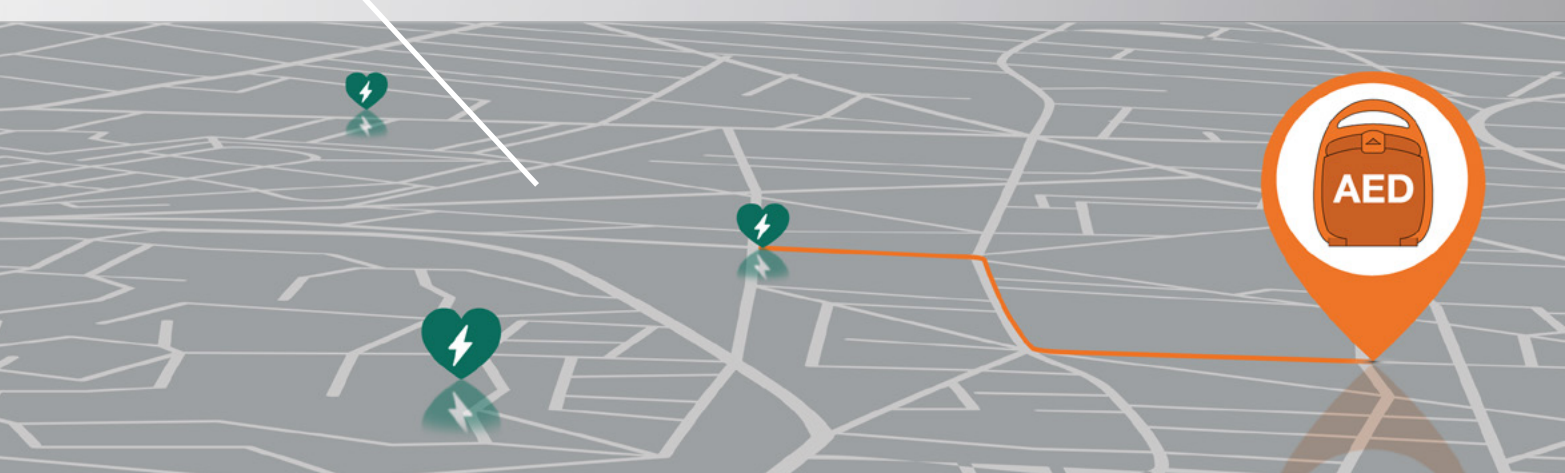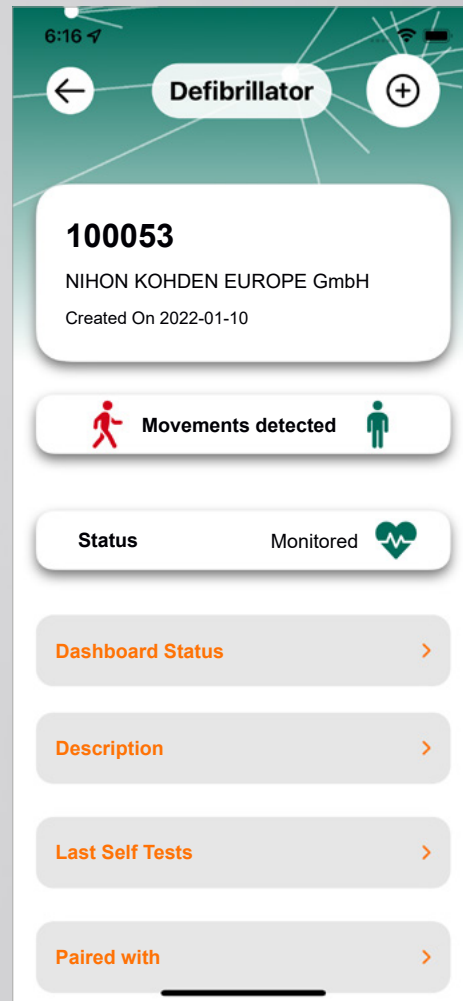

INTERFACE UND FLOTTENMANAGEMENT

Durch die Schnittstelle bietet cardioline connect eine einzigartige Integration, die es ermöglicht, Daten an mobile First-Responder-Anwendungen zu übertragen.


Unsere Flottenmanagement-Funktionen verbinden die mitunter unterschiedlichen Technologien der Hersteller von Gesundheits- und Sicherheitsgeräten auf einer vernetzten Plattform. Sie verringern so die Komplikationen, die durch den Einsatz lokaler Geräte entstehen.



PRODUKTKOMPATIBILITÄT

Volle Hardware-Kompatibilität – Der cardioline AED-3100 Defibrillator von Nihon Kohden kann mit cardioline connect ausgestattet werden.

cardioline **AED**
AED-3100

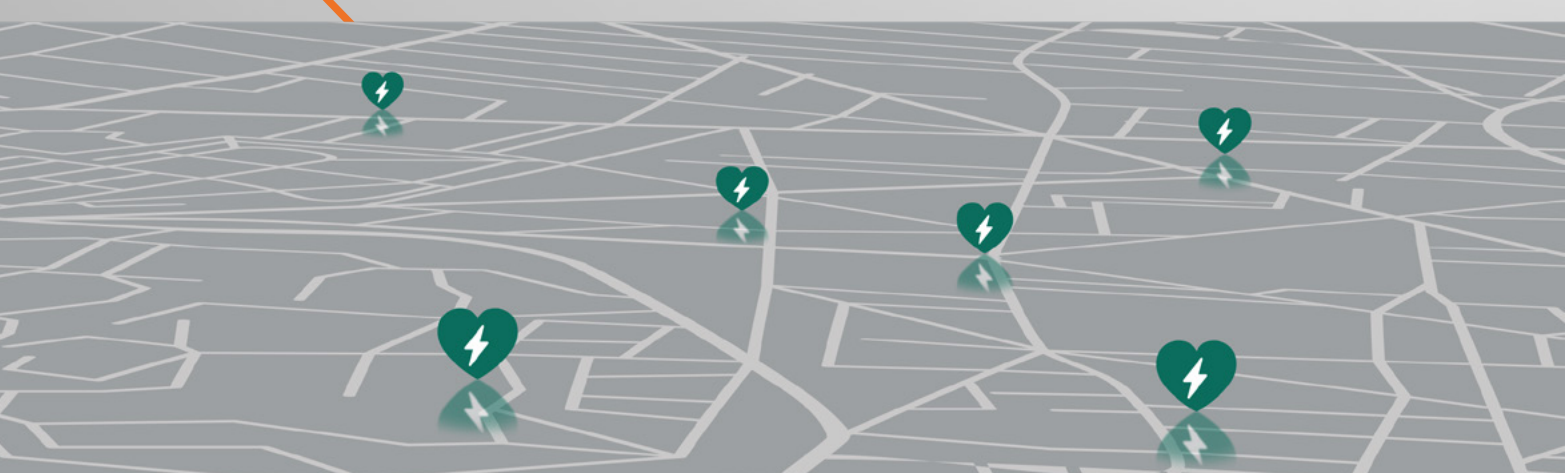



Improving Healthcare with Advanced Technology

Seit der Gründung im Jahr 1951 hat es sich Nihon Kohden zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Wir bieten Lösungen für Diagnose, Intensivmedizin, klinische Informationen und In-vitro-Diagnostik – und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Herausforderungen des Gesundheitswesens von heute und morgen gerecht zu werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.nihonkohden.com

NIHON KOHDEN DEUTSCHLAND GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: bestellung@nke.de

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germany
Phone: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

Die Cardilink GmbH ist der Technologiepartner für die cardiollifeconnect-Lösung von Nihon Kohden.

CardiLink GmbH
Gebhardtstraße 28, 6. OG OST, 90762 Fürth, Deutschland
Telefon: +49 911 733 050 44
Internet: www.cardi-link.com



Dieses Dokument kann von Nihon Kohden jederzeit und ohne Vorankündigung überarbeitet oder ersetzt werden.