


cardiolife connect

BECAUSE IT MATTERS
APP SMARTPHONE
LOCALIZZAZIONE GPS
SERVIZIO DAE 24/7

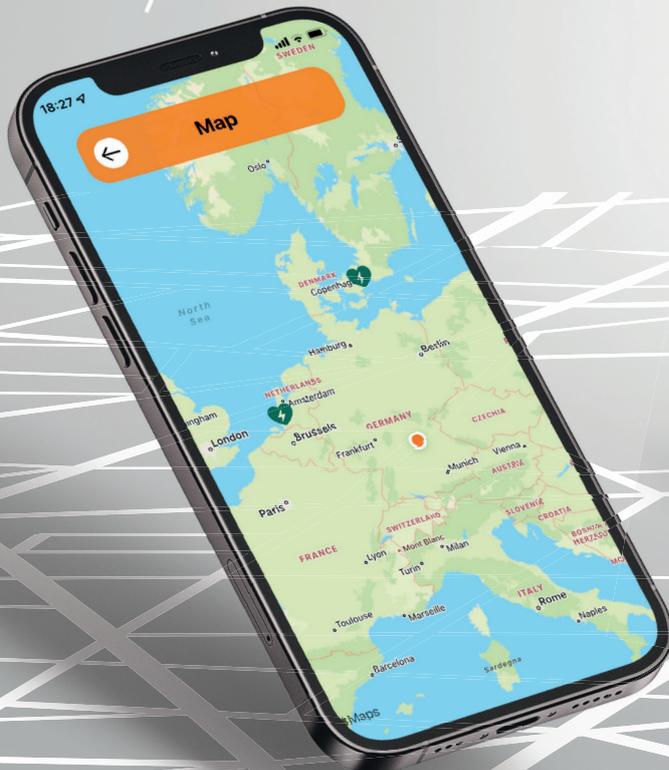

SICUREZZA CARDIACA

La soluzione cardiolife connect di Nihon Kohden offre una gestione completa dei DAE, che include il monitoraggio di cardiolife AED-3100 e di tutti gli altri DAE collegati. Non solo è possibile ottenere informazioni dettagliate sullo stato corrente del DAE, ma anche la sua posizione esatta (GPS) e sapere se è stato utilizzato per soccorrere un paziente.

L'intera piattaforma è personalizzabile sulla base delle esigenze del cliente in termini di notifiche e integrazione.

SORVEGLIANZA E DISPONIBILITÀ OPERATIVA 24/7

La sorveglianza del DAE è garantita da cardiolife connect 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. Nihon Kohden fornisce il monitoraggio del DAE per verificare che il dispositivo sia funzionante, controllando informazioni come la data di scadenza degli elettrodi monouso o il livello di carica della batteria.

È possibile personalizzare le impostazioni per ricevere avvisi in occasione degli autotest giornalieri e mensili o quando si verificano azioni specifiche come l'accensione del DAE o lo spostamento del DAE dalla sua posizione.

cardiolife connect consente di selezionare varie notifiche.

Inoltre è possibile scegliere se ricevere notifiche tramite e-mail o SMS per gli eventi desiderati.





E-mail



SMS



Messenger

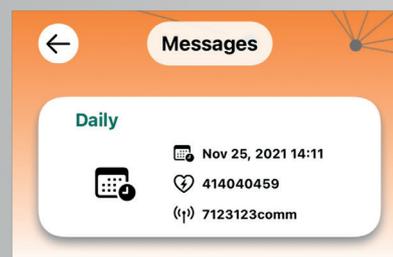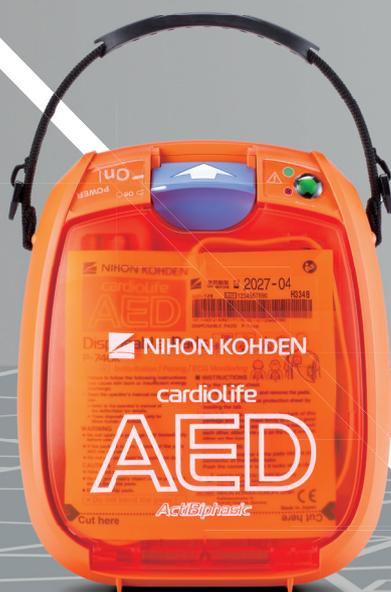


DASHBOARD E APP

La tecnologia cardiolife connect comprende un modulo di comunicazione e una dashboard accessibile via Web che offre una panoramica generale di tutti i DAE, consentendo all'operatore di monitorare il livello di servizio e disponibilità di tutte le unità installate, in qualsiasi momento. È possibile accedere alla vista complessiva anche tramite le app CardiLink® per smartphone iOS e Android.

The screenshot displays the CardiLink web dashboard interface. On the left is a navigation menu with options: Dashboard, Defibrillator, General Information, Settings, Hardware, Geolocations, Movements, Messages, Self Tests, and Service Tickets. The main content area is divided into several sections:

- Defibrillator:100015**: Model Nr: AED-3100, Owner: Nihon Kohden Corporation, Description: Nihon Kohden Europe GmbH-Entrance Lobby, Active Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM. A green status bar at the top right of this section indicates "AED is monitored and ready to be used."
- Communicator: 10000000000015**: Connected Since: Mon, January 10, 2022 03:52 PM.
- Service Tickets**: No service tickets created for this device.
- Address Information**: Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany.
- Availability**: 24/7, Public Available.
- Last Messages**:
 - 09/20/2022 23:27:28 - DAILY SelfTest received
 - 09/19/2022 23:20:29 - DAILY SelfTest received
 - 09/18/2022 23:18:12 - DAILY SelfTest received
- Summary Cards**: OK, 95% battery, 90% signal strength, Electrodes Expiration (January 2024), Battery Expiration (January 2024), Signal strength bar chart, and No Movements.
- Map**: A street map showing the location of the AED.

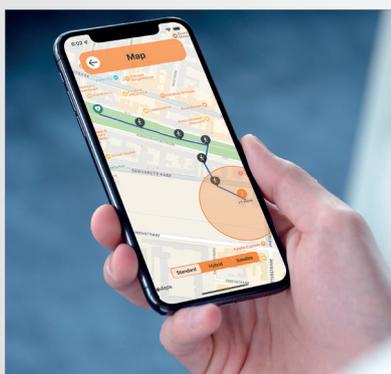




L'app facilita la visualizzazione dei dati. La registrazione viene semplificata al massimo grazie all'app CardiLink® 2.0, disponibile sia per dispositivi Android che iOS.



LOCALIZZAZIONE GPS E GEO-FENCING

cardiolife connect consente una vera geolocalizzazione GPS. Le informazioni esatte sulla posizione del DAE vengono visualizzate su una mappa digitale.

I dettagli dell'attività di movimento sono riportati nell'elenco degli spostamenti. La funzione GEO-fencing attiva un allarme quando il DAE supera i confini di un'area definita.

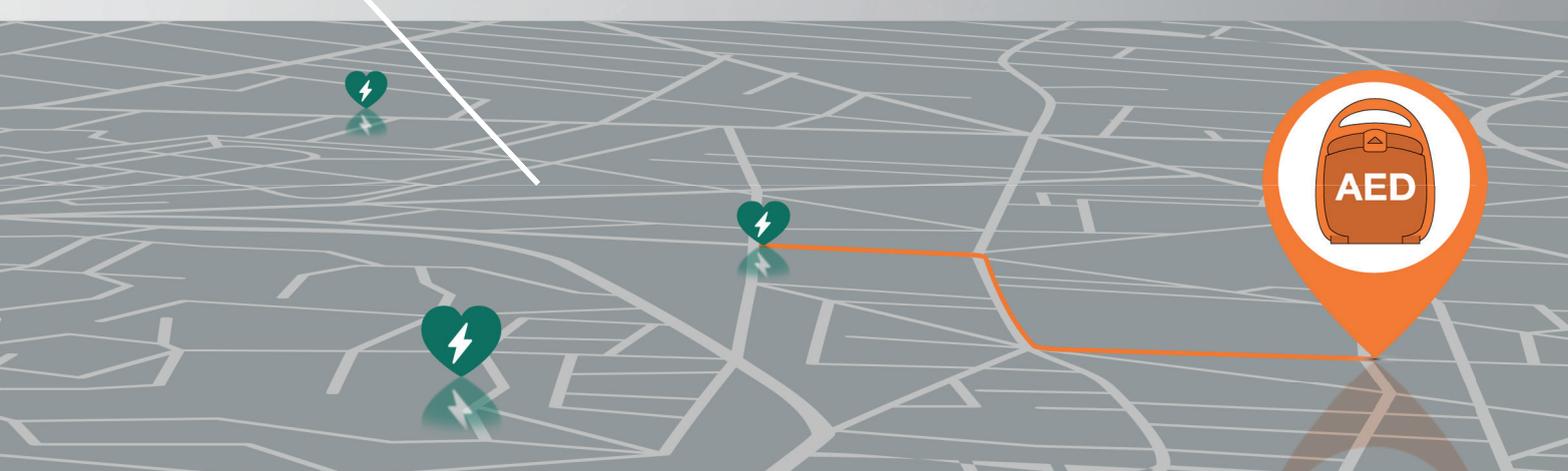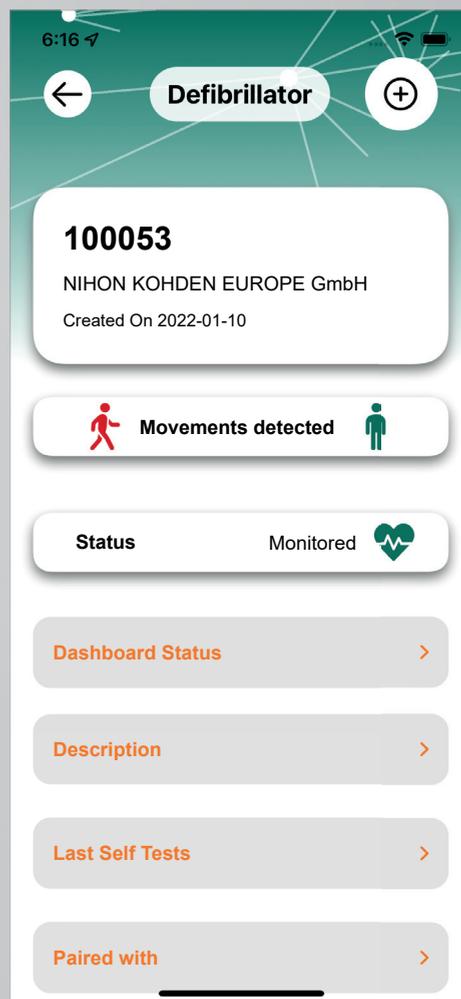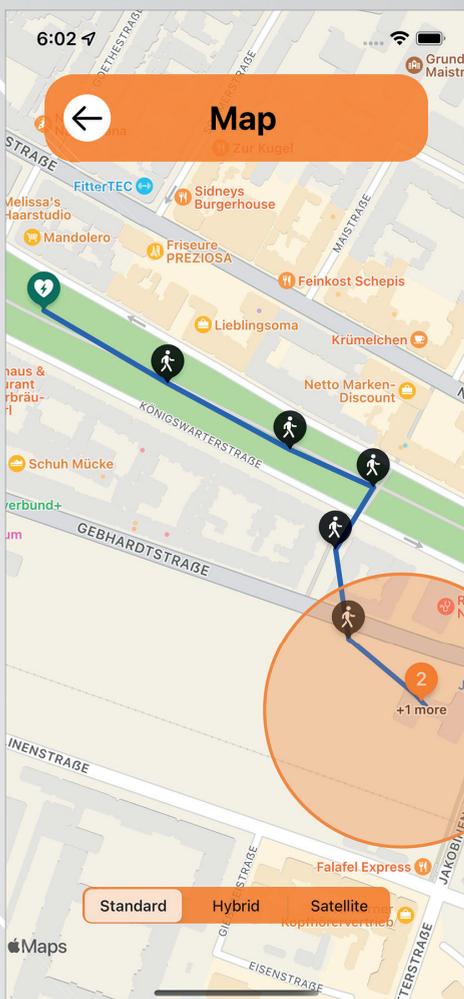

INTERFACCIA E GESTIONE DELL' INSTALLATO

Grazie alla sua interfaccia, cardioline connect offre un'integrazione esclusiva che consente di trasferire i dati alle app di primo intervento.



COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO

Questa soluzione offre la completa compatibilità hardware.
Il modello attuale di defibrillatore AED-3100 di Nihon Kohden
può essere equipaggiato con la soluzione cardioline connect.

cardioline **AED**
AED-3100





Improving Healthcare with Advanced Technology

Dalla sua fondazione nel 1951, la missione di Nihon Kohden è stata quella di migliorare la qualità della vita con tecnologie avanzate. Forniamo soluzioni per la diagnosi, le cure critiche, le informazioni cliniche e la diagnostica in vitro - e ci impegniamo a collaborare con voi per affrontare le sfide della sanità di oggi e di domani.

Visitate il sito www.nihonkohden.com per saperne di più.

NIHON KOHDEN ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 28, 24124 Bergamo Italia
Telefono: +39 035 219543, Fax: +39 035 232546
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nkitaly.com

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Germania
Telefono: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

CardiLink GmbH è il partner tecnologico per la soluzione
cardiolifeconnect di Nihon Kohden.

CardiLink GmbH
Gebhardtstraße 28, 6. OG OST, 90762 Fürth, Germania
Telefono: +49 911 733 050 44
Internet: www.cardi-link.com



Il presente documento può essere revisionato o sostituito
da Nihon Kohden in qualsiasi momento, senza preavviso.